




KATALÓG KULTIVAČNÝCH MÉDIÍ

2025

Kultivačné médiá získali certifikát o zhode vyrábaných diagnostických pomôcok in vitro s technickými požiadavkami na bezpečnosť podľa Smernice 98/79/EC Európskeho parlamentu a Európskej rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a sú oprávnené používať značku CE.

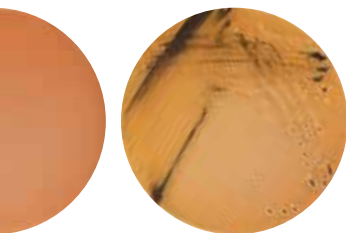

Salmonella enteritidis produkujúca H₂S

Agar dezoxycholátovo-citrátový/DC

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na selektívnu izoláciu a diferenciáciu enterobaktérií.


Salmonella typhimurium ATCC 14028/CCM 4761 – bezfarebné, lesklé kolónie s čiernym stredom.

Shigella flexneri CCM 4422 – bezfarebné alebo naružovelé kolónie.

Enterococcus faecalis ATCC 29212/CCM 4224 – bez známkov rastu.

 Balenie PM: 18 ml

KP 003  Cena bez DPH: 0,52 €

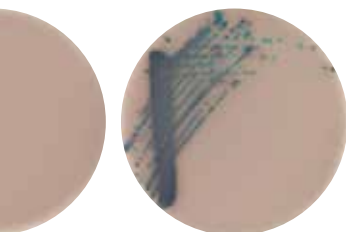

Zmes *E. coli*, *E. faecalis*

Agar chromogénny na kultiváciu moču Uriselect/URI

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a semikvantitatívne stanovenie patogénov močových ciest.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – okrúhle, ploché, ružovoľavé kolónie krémovej konzistencie.


Enterococcus faecalis ATCC 29212/CCM 4224 – tyrkysovomodré kolónie krémovej konzistencie.

Proteus mirabilis CCM1944 – žltohnedé kolónie s hnedým sfarbením pôdy okolo kolónií.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – žltkasté kolónie krémovej konzistencie.

 Balenie PM: 18 ml

KP 005  Cena bez DPH: 0,79 €

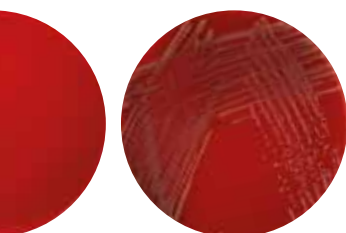

Staphylococcus aureus
ATCC 25923/CCM3953

Agar krvný č. 4 so 7 % baranej krvi (Columbia)/KACO

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na kultiváciu a izoláciu rastovo náročných mikroorganizmov.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – žltkasté kolónie krémovej konzistencie s výraznou zónou β – hemolýzy.


Streptococcus pyogenes ATCC 19615/CCM 4425 – sivobiele kolónie suchej konzistencie s výraznou zónou β – hemolýzy.

Streptococcus pneumoniae CCM 4424 – okrúhle, ploché zelené kolónie s preliacným stredom s diskretnou zónou α – hemolýzy.

Streptococcus agalactiae CCM6187 – šedobiele kolónie krémovej konzistencie s diskretnou zónou β – hemolýzy.

 Balenie PM: 18 ml

KP 008  Cena bez DPH: 0,55 €

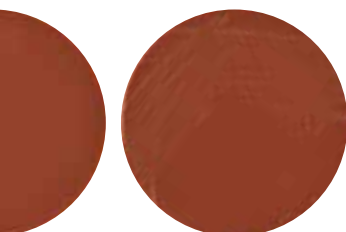

Haemophilus influenzae
ATCC 35056/CCM 4456

Agar krvný č. 4 so 7 % konskej krvi a antibiotikami čokoládový/CAK+BAC

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na kultiváciu a izoláciu *Haemophilus* spp. zo vzoriek horných a dolných dýchacích ciest.

Haemophilus influenzae ATCC 49766/CCM 4457 – sivobiele, lesklé kolónie.

Streptococcus pyogenes ATCC 19615/CCM 4425 – bez známkov rastu.

 Balenie PM: 18 ml

KP 009  Cena bez DPH: 0,68 €

Agar krvný č. 4 so 7 % konskej krvi čokoládový/CAK

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na kultiváciu a izoláciu rastovo náročných baktérií.

Haemophilus influenzae ATCC 49766/CCM4457 – sivobiele, lesklé kolónie.

 Balenie PM: 18 ml

KP 010  Cena bez DPH: 0,59 €

Haemophilus influenzae
ATCC 35056/CCM 4456



Agar na testovanie citlivosti antimykotík (SAB-ASTA)/ASTA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na testovanie citlivosti mikroskopických húb na antimykotiká diskovou difúznou metódou.


Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, biele kolónie.

Candida krusei ATCC 6258/CCM 8271 – rast dobrý, biele matné kolónie.

 Balenie PM: 18 ml

KP 014  Cena bez DPH: 0,75 €

Aspergillus spp.

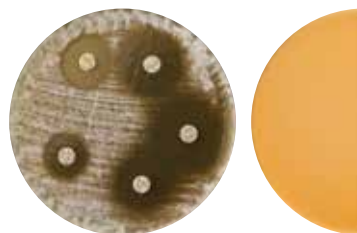

Agar podľa Czapeka a Doxa s kvasničným autolyzátom/CYA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu vláknitých húb.


Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast dobrý, bielo/žlté mycélium, čierna sporulácia.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, krémové kolónie.

 Balenie PM: 18 ml

KP 015  Cena bez DPH: 0,49 €

Aspergillus sekcia *Fumigati*

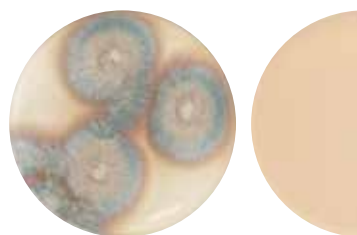

Agar podľa MacConkeyho č. 3/MC

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a diferenciálnu diagnostiku gramnegatívnych baktérií a na odlíšenie laktóza-pozitívnych a laktóza-negatívnych kmeňov.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – ploché, okrúhle, ružovoľalové kolónie.


Salmonella enterica subsp. *enterica* sérovar *Enteritidis* CCM4420 – bledožlté kolónie.


Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – bez známkov rastu.

 Balenie PM: 18 ml

KP 018  Cena bez DPH: 0,50 €

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954

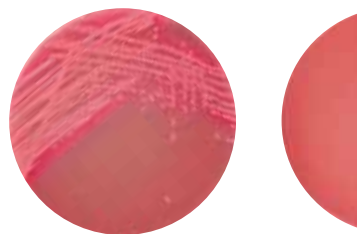

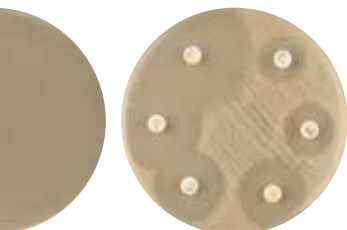

Escherichia coli
ATCC 25922/CCM 3954

Agar podľa Muellera a Hintonovej/MH

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na zisťovanie citlivosti rýchlo rastúcich baktérií na antimikrobiálne látky difúznou metódou in vitro.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – dobrý rast.


Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853/CCM 3955 – dobrý rast.

Staphylococcus aureus ATCC 29213/CCM 4223 – dobrý rast.

Enterococcus faecalis ATCC 29212/CCM 4224 – dobrý rast.

 Balenie PM: 18 ml

KP 019  Cena bez DPH: 0,49 €

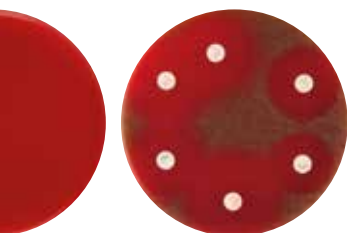

Streptococcus pneumoniae CCM 4424

Agar podľa Muellera a Hintonovej s 5 % konskej krvi a s NAD/MHF

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na zisťovanie citlivosti rastovo náročných baktérií na antimikrobiálne látky difúznou metódou in vitro.

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619/CCM 4501 – dobrý rast.

Haemophilus influenzae ATCC 49766/CCM4457 – dobrý rast.

 Balenie PM: 25 ml

KP 161  Cena bez DPH: 0,58 €



Aspergillus sekcia *Fumigati*

Agar podľa Sabourauda s 2 % glukózy/SAB

POPIS MÉDIA:


Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu mikroskopických húb.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, bielo-krémové kolónie.

Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast dobrý, bielo/žlté mycélium, čierna sporulácia.

 Balenie PM: 18 ml

KP 021  Cena bez DPH: 0,53 €

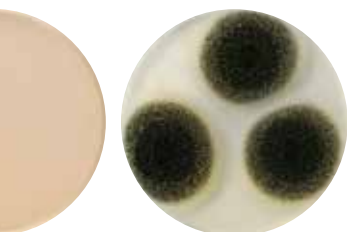

Aspergillus sekcia *Nigri*

Agar podľa Sabourauda so 4 % glukózy a s chloramfenikolom/SABM

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu mikroskopických húb.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, bielo-krémové kolónie.

Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast dobrý, bielo/žlté mycélium, čierna sporulácia.

 Balenie PM: 18 ml

KP 022  Cena bez DPH: 0,56 €

 Balenie PM [FL]: 500 ml

KP 199  Cena bez DPH: 4,77 €

Agar pre anaeróbne baktérie so 7 % baranej krvi/AKA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené pre kultiváciu sporulujúcich a nesporulujúcich anaeróbných mikroorganizmov.

Clostridium perfringens ATCC 13124/CCM 4435 – šedé kolónie nepravidelného tvaru s dvojitou zónou betahemolýzy

Bacteroides fragilis ATCC 25285/CCM 4712 – okrúhle, šedobiele kolónie s lesklým povrchom.

Balenie PM: 18 ml

KP 001 Cena bez DPH: 0,56 €

Bacteroides fragilis
ATCC 23745/CCM 4712



Agar RPMI/RPMI

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na testovanie kvantitatívnej citlivosti mikroskopických húb na antimykotiká.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, biele kolónie.

Candida parapsilosis ATCC 22019/CCM 8260 – rast dobrý, biele kolónie.

Balenie PM: 20 ml

KP 027 Cena bez DPH: 2,21 €

Candida glabrata



Agar selektívny na zisťovanie osmotolerancie kvasiniek/NACLA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na zisťovanie osmotolerancie kvasiniek.


Candida parapsilosis ATCC 22019/CCM 8260 – rast, biele sfarbenie.

Candida krusei ATCC 6258/CCM 8271 – rast, biele sfarbenie.

Balenie PM: 14 ml

KP 038 Cena bez DPH: 0,44 €

Candida glabrata

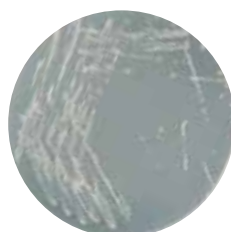

Agar selektívny pre *Burkholderia cepacia*/BC

POPIS MÉDIA:

Selektívne médium určené na kultiváciu a izoláciu *Burkholderia cepacia* vo vzorkách z respiračného traktu.

Burkholderia sp. CCM3919 – bledosivé kolónie s ružovým sfarbením pôdy okolo kolónií.


Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853/CCM 3955 – bez známkov rastu.

Balenie PM: 18 ml

KP 029 Cena bez DPH: 1,51 €

Burkholderia cepacia
ATCC 25608/CCM 3919



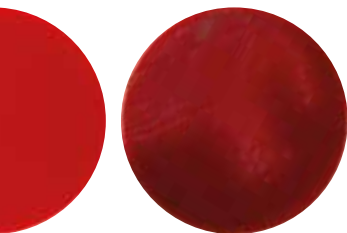

Campylobacter jejuni

Agar selektívny pre *Campylobacter* spp./CB

POPIS MÉDIA:


Selektívne médium určené na kultiváciu a izoláciu *Campylobacter* spp. pri teplote 42 °C a *Arcobacter* spp. pri teplote 25 °C.

Campylobacter jejuni ATCC 29428 /CCM7212 – sivé kolónie mierne mukóznej konzistencie.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – bez známk rastu.

 Balenie PM: 18 ml

KP 030  Cena bez DPH: 0,62 €

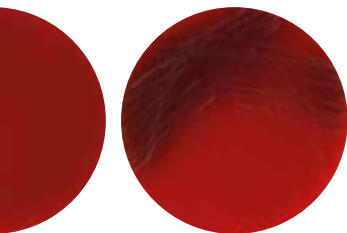

Gardnerella vaginalis

Agar selektívny pre *Gardnerella vaginalis*/GSA

POPIS MÉDIA:

Selektívne médium určené na kultiváciu a izoláciu *Gardnerella vaginalis*.


Gardnerella vaginalis CCM 6221 – sivé kolónie s diskretnou zónou β-hemolýzy.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – bez známk rastu.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – bez známk rastu.

 Balenie PM: 18 ml

KP 031  Cena bez DPH: 0,69 €

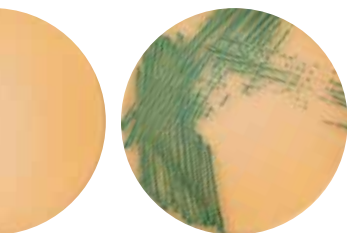

Lactobacillus jensenii produkujúci H₂O₂

Agar selektívny pre *Lactobacillus* spp. (MRS)/LSA

POPIS MÉDIA:

Selektívne médium určené na kultiváciu a izoláciu laktobacilov s odlišením H₂O₂ produkujúcich a H₂O₂ neprodukujúcich kmeňov.


Lactobacillus rhamnosus ATCC 9595/CCM 1828 – biele, okrúhle kolónie krémovej konzistencie.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – bez známk rastu.

Lactobacillus jensenii – modré okrúhle kolónie.

 Balenie PM: 18 ml

KP 033  Cena bez DPH: 0,75 €

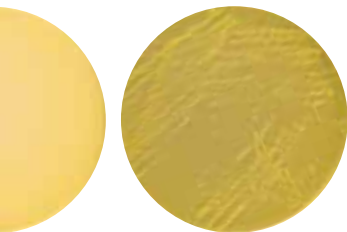

Listeria monocytogenes
ATCC 19117/CCM 4699

Agar selektívny pre *Listeria* spp./LIA

POPIS MÉDIA:

Selektívne médium určené na kultiváciu a izoláciu *Listeria monocytogenes*/*Listeria* spp.

Listeria monocytogenes ATCC 19117/CCM 4699 – žlté, okrúhle kolónie krémovej konzistencie.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – bez známk rastu.

 Balenie PM: 18 ml

KP 034  Cena bez DPH: 0,95 €

Agar selektívny pre *Neisseria* spp. s vankomycínom/NSA+ATB

POPIS MÉDIA:


Selektívne médium určené na izoláciu *Neisseria gonorrhoeae* a *Neisseria meningitidis*.
Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424/CCM 4500 – rast dobrý, sivasté, okrúhle, lesklé kolónie.

Enterococcus faecalis ATCC 29212/CCM 4224 – bez známok rastu.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – bez známok rastu.

Balenie PM: 18 ml

KP 035 Cena bez DPH: 0,70 €

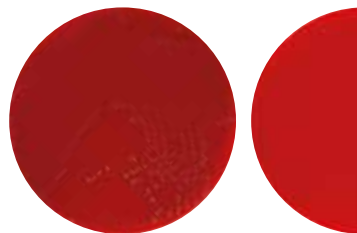

Neisseria gonorrhoeae

Agar selektívny pre rezistentné stafylokoky oxacilínový skríningový/OXAR

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na selektívnu kultiváciu stafylokokov rezistentných na oxacilín.

Staphylococcus aureus ATCC 43300/CCM 4750 – rast dobrý, svetložlté, okrúhle kolónie krémovej konzistencie.

Balenie PM: 18 ml

KP 036 Cena bez DPH: 0,52 €



Staphylococcus aureus
ATCC 25923/CCM 3953

Agar selektívny pre *Yersinia* spp./YSA

POPIS MÉDIA:


Selektívne médium určené na kultiváciu a izoláciu *Yersinia enterocolitica*/*Yersinia* spp.

Yersinia enterocolitica ATCC 27729/CCM 5671 – rast dobrý, ružové, okrúhle kolónie s bordovým stredom.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – bez známok rastu.

Balenie PM: 18 ml

KP 039 Cena bez DPH: 0,79 €

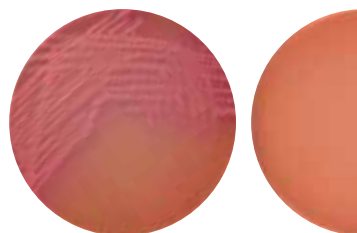

Yersinia enterocolitica
ATCC 27729/CCM 567

Agar so sladinkovým výťažkom/MEA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu vláknitých húb.

Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast dobrý, biele mycélium, čierna sporulácia.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, bielo-krémové kolónie.

Balenie PM: 18 ml

KP 040 Cena bez DPH: 0,55 €



Aspergillus sekcia *Nigri*



Fusarium solani

Agar so zemiakovou dextrózou/PDA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu vláknitých húb.


Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, bielo-krémové kolónie.

Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast dobrý, biele mycélium, čierna sporulácia.



Balenie PM: 18 ml

KP 041 Cena bez DPH: 0,54 €

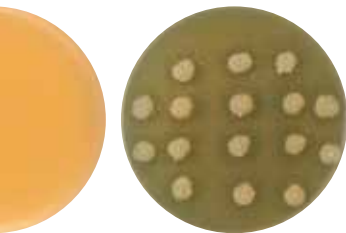

Malassezia spp.

Agar so žĺčou, olivovým olejom a Tweenom/ZOT

POPIS MÉDIA:


Kultivačné médium určené na izoláciu lipofilných kvasiniek.

Malassezia furfur ATCC 14521 – rast dobrý, krémové/matné/sivasté kolónie.



Balenie PM: 18 ml

KP 042 Cena bez DPH: 0,59 €

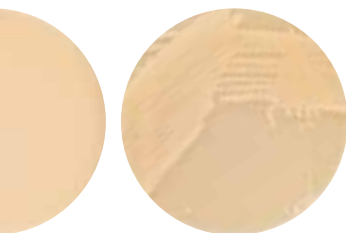

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853/CCM 3955

Agar tryptónovo-sójový/TSA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – biele kolónie krémovej konzistencie.

Bacillus subtilis ATCC 6633/CCM 1999 – biele kolónie krémovej konzistencie.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027/CCM 1961 – belavé kolónie krémovej konzistencie.

Staphylococcus aureus ATCC 6538/CCM 4516 – žltkasté kolónie krémovej konzistencie.



Balenie PM: 18 ml

KP 113 Cena bez DPH: 0,51 €



Balenie PM [FL]: 500 ml

KP 169 Cena bez DPH: 6,80 €



Candida spp.

Agar z kukuričnej múky (Corn Meal)/CORN

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na prípravu mikrokultúr pre sledovanie mikromorfologických vlastností mikroskopických húb.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, krížový rozter, produkcia pseudomycélia, chlamydospór.



Balenie PM: 20 ml

KP 045 Cena bez DPH: 0,74 €



Bujón anaeróbny podľa Schaedlera/VLB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na pomnoženie fakultatívne anaeróbných a striktné anaeróbných baktérií.

Clostridium perfringens ATCC 13124/CCM 4435 – rast sa prejaví zákalom.

Bacteroides fragilis ATCC 25285/CCM 4712 – rast sa prejaví zákalom.

 Balenie SK: 5 ml

KP 049  Cena bez DPH: 0,39 €



Bujón podľa Mullera a Hintonovej/MHB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok používaný pri stanovení minimálnej inhibičnej koncentrácie antibiotík.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – rast sa prejaví zákalom.

Escherichia coli ATCC25922/CCM3954 – rast sa prejaví zákalom.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853/CCM 3955 – rast sa prejaví zákalom.

 Balenie SK: 8 ml

KP 051  Cena bez DPH: 0,39 €

 Balenie SK: 10 ml

KP 227  Cena bez DPH: 0,40 €



Aspergillus sekcia *Nigrii*

Bujón podľa Sabourauda/SABB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na selektívne pomnoženie mikroskopických húb.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast sa prejaví zákalom.

Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast sa prejaví zákalom.

 Balenie SK: 5 ml

KP 052  Cena bez DPH: 0,39 €

 Balenie SK [FL]: 500 ml

KP 170  Cena bez DPH: 4,97 €



Bujón podľa Todda a Hewitta s kolimycínom/THB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený primárne na neselektívnu kultiváciu betahemolytických streptokokov.

Streptococcus agalactiae CCM 6187 – rast sa prejaví zákalom.

 Balenie SK: 5 ml

KP 053  Cena bez DPH: 0,40 €



Bujón pre testovanie účinnosti sterilizátorov s *Geobacillus stearothermophilus* a s brómkrezolovou purpurovou/SEVG

POPIS MÉDIA:

Tekuté kultivačné médium určené pre bioindikátory s obsahom spór *Geobacillus stearothermophilus*.

Geobacillus stearothermophilus CCM 4359 – po naočkování bioindikátora zmena farby kultivačného média na žltú po kultivácii 48 hod./55 °C.

Balenie SK: 6 ml

KP 102 Cena bez DPH: 0,38 €

Balenie SK: 10 ml

KP 166 Cena bez DPH: 0,39 €



pozitívny výsledok –
neúčinný proces sterilizácie

Bujón selenitový/SEL

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na selektívne pomnoženie baktérií rodov *Salmonella* a *Shigella* spp.

Salmonella enterica subsp. *enterica* sérovar *Enteritidis* CCM 4420 – rast sa prejaví zákalom.

Balenie SK: 5 ml

KP 056 Cena bez DPH: 0,38 €



Bujón tioglykolátový/TG

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na neselektívne pomnoženie aeróbných aj anaeróbných baktérií podľa PhEur.

Staphylococcus aureus ATCC 6538/CCM 4516 – rast kmeňa v hornej tretine kultivačného média po 18-24 hod./35 °C.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027/CCM 1961 – rast kmeňa v hornej tretine kultivačného média po 18-24 hod./35 °C.

Clostridium sporogenes ATCC 19404/CCM 4409 – rast kmeňa v hornej tretine kultivačného média po 18-24 hod./35 °C.

Balenie SK: 4 ml

KP 098 Cena bez DPH: 0,37 €

Balenie SK: 5 ml

KP 057 Cena bez DPH: 0,38 €

Balenie SK: 10 ml

KP 058 Cena bez DPH: 0,38 €

Balenie SK [FL]: 50 ml

KP 059 Cena bez DPH: 0,92 €

Balenie SK [FL]: 500 ml

KP 171 Cena bez DPH: 4,47 €



Bujón tryptónovo-sójový/TSB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na neselektívne pomnoženie baktérií a mikromycét - kultivačné médium predpísané PhEur na skúšku sterility.

Bacillus subtilis ATCC 6633/CCM 1999 – rast kmeňa formou blanky na povrchu kultivačného média po 48-72 hod./25 °C.

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404/CCM 8222 – rast kmeňa po kultivácii 48-72 hodín pri teplote 25 °C.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast kmeňa v podobe zákalu s bielym sedimentom po 48-72 hod./25 °C.

Balenie SK: 10 ml

KP 060 Cena bez DPH: 0,39 €

Balenie SK: 4 ml

KP 099 Cena bez DPH: 0,37 €

Balenie SK [FL]: 500 ml

KP 167 Cena bez DPH: 2,89 €





Bujón živný č. 2/ZB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na neselektívne pomnoženie patogénnych a podmienenene patogénnych baktérií.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – rast sa prejaví zákalom.

-  Balenie SK: 5 ml
-  Balenie SK: 10 ml

- KP 061  Cena bez DPH: 0,37 €
- KP 162  Cena bez DPH: 0,39 €



Bujón živný č. 2 s 2 % glukózy/GLUB

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na dôkaz fermentácie glukózy baktériami.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – rast sa prejaví zákalom.

Streptococcus pyogenes ATCC 19615/CCM 4425 – rast sa prejaví zákalom.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – rast sa prejaví zákalom.

-  Balenie SK: 5 ml
-  Balenie SK: 10 ml
-  Balenie SK [FL]: 50 ml

- KP 062  Cena bez DPH: 0,38 €
- KP 063  Cena bez DPH: 0,39 €
- KP 064  Cena bez DPH: 0,91 €



pozitívny s tvorbou plynu

Bujón živný č. 2 s 2 % glukózy a plynokami/GLUBP

POPIS MÉDIA:

Živný roztok určený na dôkaz fermentácie na dôkaz fermentácie glukózy s tvorbou plynu baktériami čeľade Enterobacteriaceae.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – zákal kultivačného média a tvorba plynu po kultivácii 18-24 hod./35 °C.

-  Balenie SK: 7 ml

- KP 065  Cena bez DPH: 0,40 €



Glukóza 20 %/GLU20

POPIS MÉDIA:

Roztok glukózy s koncentráciou 20 % určený na transport bioptických vzoriek.

-  Balenie SK: 1 ml

- KP 209  Cena bez DPH: 0,37 €



Roztok fyziologický/FR

POPIS MÉDIA:

Roztok určený na prípravu suspenzií mikroorganizmov a pre prípravu mikroskopických preparátov.

 Balenie SK: 1 ml

KP 077  Cena bez DPH: 0,36 €

 Balenie SK: 2 ml

KP 214  Cena bez DPH: 0,36 €

 Balenie SK: 3 ml

KP 078  Cena bez DPH: 0,36 €

 Balenie SK: 4,5 ml

KP 079  Cena bez DPH: 0,36 €

 Balenie SK: 6 ml

KP 160  Cena bez DPH: 0,36 €



Skúmavka zo skla, 15x100 mm

KP V 001  Cena bez DPH: 0,15 €

Skúmavka zo skla, 15x150 mm

KP V 002  Cena bez DPH: 0,20 €

Fľaša reagenčná 1 000 ml

KP V 003  Cena bez DPH: 7,00 €

Fľaša reagenčná 100 ml

KP V 004  Cena bez DPH: 3,02 €

Fľaša reagenčná 2 000 ml

KP V 005  Cena bez DPH: 9,10 €

Kultivačné médiá získali certifikát o zhode vyrábaných diagnostických pomôcok in vitro s technickými požiadavkami na bezpečnosť podľa Smernice 98/79/EC Európskeho parlamentu a Európskej rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a sú oprávnené používať značku CE.

Tekuté kultivačné médiá sú štandardne balené v skúmavkách (SK) alebo fľašiach (F).

Skúmavky a fľaše sú vratné obaly, v prípade ich nevrátenia bude kupujúcemu ich cena účtovaná.



Trichophyton ajelloi

Agar Dermasel/DERM

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu dermatofytov a ostatných mikroskopických húb.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, bielo-krémové kolónie.

Trichophyton interdigitale – CCM 8377/ATCC 9533 – rast dobrý, biele až krémové kolónie so žltou až ružovo hnedým sfarbením.

 Balenie SK: 6 ml

KP 002  Cena bez DPH: 0,48 €



Agar krvný č. 2 základný bez krvi šikmý/SIKA

POPIS MÉDIA:

Transportná pôda určená na zasielanie kmeňov baktérií a kvasiniek na bližšiu identifikáciu, pôda na prípravu subkultúr referenčných kmeňov aeróbných baktérií a kvasiniek zo želatínových diskov.

Staphylococcus aureus ATCC 25923/CCM 3953 – dobrý rast.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – dobrý rast.

Salmonella enterica subsp. *enterica* sérovar *Enteritidis* CCM 4420 – dobrý rast.

 Balenie SK: 7 ml

KP 007  Cena bez DPH: 0,40 €

 Balenie SK: 5 ml

KP 155  Cena bez DPH: 0,39 €



Escherichia coli

Proteus vulgaris

Agar MIU/MIU

POPIS MÉDIA:

Kultivačná pôda určená na dôkaz pohyblivosti baktérií, tvorby indolu a štiepenia močoviny.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – pôda svetložitá s rozptýleným zákalom okolo miesta vpichu, po pridaní Kováčovho činidla zmena farby činidla zo svetložltej na červenú ako dôkaz tvorby indolu.

Proteus hauseri ATCC 13315/CCM 7011 – zmena farby pôdy na ružovoľalovú v dôsledku štiepenia urey, rozptýlený zákal okolo miesta vpichu, po pridaní Kováčovho činidla zmena farby činidla zo svetložltej na červenú ako dôkaz tvorby indolu.

 Balenie SK: 2 ml

KP 011  Cena bez DPH: 0,36 €

 Balenie SK: 3,5 ml

KP 097  Cena bez DPH: 0,37 €

 Balenie SK: 3 ml

KP 163  Cena bez DPH: 0,37 €

Agar na auxanogram dusíkový/N-AGAR

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na zisťovanie asimilačných vlastností kvasiniek.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – hodnotenie asimilačných zón v okolí zdroja dusíka.

Candida krusei ATCC 6258/CCM 8271 – hodnotenie asimilačných zón v okolí zdroja dusíka.

 Balenie SK: 20 ml

KP 012  Cena bez DPH: 1,01 €



Candida krusei



Agar na auxanogram uhlíkový/C-AGAR

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na zisťovanie asimilačných vlastností kvasiniek.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – hodnotenie asimilačných zón v okolí zdroja uhlíka.

Balenie SK: 20 ml

KP 013 Cena bez DPH: 1,04 €



Candida glabrata

Agar podľa Hajna/HAJN

POPIS MÉDIA:

Kultivačná pôda určená na zisťovanie základných biochemických vlastností gramnegatívnych baktérií.

Escherichia coli ATCC 25922/CCM 3954 – súvislý rast naočkovaného kmeňa na povrchu kultivačného média, zmena zafarbenia kultivačného média na žltú, roztrhaný agar v dôsledku masívnej tvorby plynu.

Proteus mirabilis CCM 1944 – súvislý rast naočkovaného kmeňa na povrchu kultivačného média, kultivačné médium červené s čiernym sfarbením v dolnej tretine s diskretnou tvorbou plynu.

Shigella flexneri CCM 4422 – súvislý rast naočkovaného kmeňa na povrchu kultivačného média, zmena zafarbenia dolnej tretiny kultivačného média na žltú, horná časť média červená, bez tvorby plynu.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853/CCM 3955 – súvislý rast naočkovaného kmeňa na povrchu kultivačného média, bez zmeny farby média a bez tvorby plynu.

Balenie SK: 7 ml

KP 016 Cena bez DPH: 0,40 €

Balenie SK: 5 ml

KP 164 Cena bez DPH: 0,39 €



Escherichia coli

Salmonella enteritidis

Agar podľa Christensena (šikmá urea)/CHM

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na dôkaz štiepenia urey.

Trichophyton interdigitale – CCM 8377/ATCC 9533 – rast dobrý, zmena zafarbenia kultivačného média na cyklámenovú farbu (pozitívna reakcia).

Balenie SK: 4 ml

KP 017 Cena bez DPH: 0,37 €



Trichophyton interdigitale

Agar podľa Sabourauda s 2 % glukózy a s chloramfenikolom šikmý/SABASA

POPIS MÉDIA:

Kultivačné médium určené na izoláciu a kultiváciu mikroskopických húb.

Candida albicans ATCC 10231/CCM 8215 – rast dobrý, bielo-kremové kolónie.

Aspergillus niger ATCC 9642/CCM 8189 – rast dobrý, bielo/žlté mycélium, čierna sporulácia.

Balenie SK: 6 ml

KP 023 Cena bez DPH: 0,41 €



Trichophyton rubrum

